


Corpora Прессотерапия

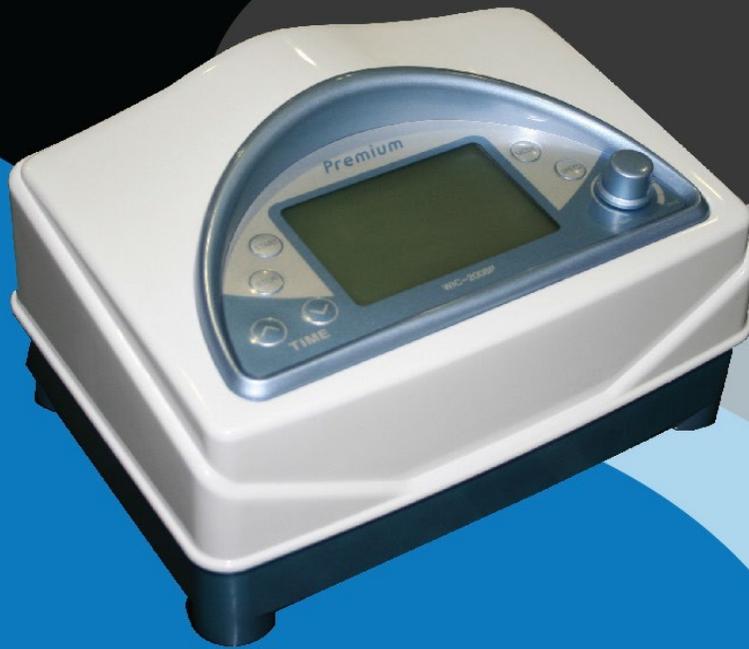

CORPORA
THE FAST BEAUTY CONCEPT

Эксклюзивный представитель в Украине ЧП «Арткосмо»

Тел. 526 60 55, 067 152 51 15, 050 800 19 54, 068 071 87 90, 093 074 45 44

E-mail: natinuel@mail.ru, www.cosoaelita.com.uaZ

NEW



NEW

ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ БЕЗ УСИЛИЙ И ДИЕТ !!!

За ОДНУ процедуру вы приобретаете:

Уменьшение объемов тела

Снятие мышечного напряжения

Улучшение венозного кровообращения

Качественную профилактику целлюлита

Устранение отеков и тяжести в ногах

Стабилизация обменных процессов в организме

Легкость и хорошее настроение

Прессотерапия (лимфодренаж) – метод, который основан на ритмичной стимуляции мышц в необходимой последовательности. Основная цель прессотерапии - вызвать естественный дренаж лимфы, уменьшить содержание жидкостей и токсинов в организме.

Прессотерапия (лимфодренаж) эффективен при лечении ожирения, целлюлита, отёков и различных заболеваний, связанных с нарушением циркуляции крови и лимфы.

От нарушения лимфатического и венозного оттока страдают функции органов и тканей. Длительно существующий отёчный синдром часто влечёт за собой ухудшение микроциркуляции, нарушения клеточного метаболизма, усугубление гипоксии тканей. В условиях гипоксии активизируется соединительная ткань. Это, в конечном итоге, может привести к лимфатической недостаточности, лимфэдеме, слоновости. Также, не следует забывать, что нарушения трофики тканей влекут за собой сильное истончение кожи и зуд.

Прессотерапия оказывает спазмолитический и сосудорасширяющий эффект. Используется в комплексном лечении стойкого мышечного напряжения, снимает тяжесть в ногах и тонизирует стенки сосудов, имеет профилактическое действие против варикозного расширения вен.

Прессотерапия уверенно борется с посттравматическими и послеоперационными проблемами. Существуют специальные программы, в которых прессотерапии применяется для реабилитации после липосакции.

Прессотерапия – незаменимый инструмент в лечение целлюлита, т.к. причинами является гипоксия и застой межклеточной жидкости в подкожной жировой клетчатке. Именно поэтому ее часто используют при лечении целлюлита.


В случае послеоперационных отёков, при варикозном расширении вен или склонности к нему, прессотерапия чуть ли не единственный эффективный метод помощи и лечения.

Особенности аппарата Corpogra:

- *Четырехкамерные сапоги для выполнения высокоэффективного массажа;*
- *Три режима сжатия;*
- *Легкое подключение проводов и сапожек;*
- *Система безопасности. При отсоединении аппарата, воздуховоды деактивируются;*
- *5 скоростей давления (4, 8, 12, 16 и 20 секунд);*
- *Давление: 50-280 ммhg (регулируемое);*
- *Таймер: 0-60 мин.*

Составные части аппарата

1. Сапоги
2. Специальный пояс
3. Рукав со специальным креплением, во избежание скольжения
4. Массажные стельки

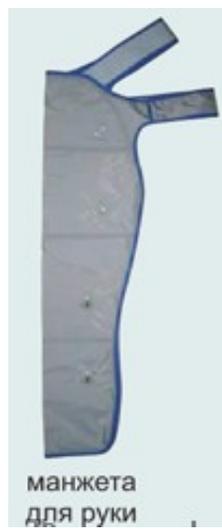

Технические параметры

- **Модель - WIC – 2008**
- **Используемый вольтаж - AC220-240V, 50/60 Гц**
- **Предохранители – AC250V 1A 20mm**
- **Потребление 50VA**
- **Место размещения – внутри помещения**
- **Таймер: 0-60 мин.**
- **Давление: 50-280 ммHg (+/- 10%)**
- **Габариты – 280X215X172 мм**
- **Вес – 2,6 кг**



CORPORA
THE FAST BEAUTY CONCEPT

Эксклюзивный представитель в Украине ЧП «Арткосмо»

Тел. 526 60 55, 067 152 51 15, 050 800 19 54, 068 071 87 90, 093 074 45 44

E-mail: natinuel@mail.ru, www.cosoaelita.com.uaZ

Показания к применению:

- Лечение любой стадии целлюлита и его профилактика;
- Устранение локальных жировых отложений и борьба с избыточным весом;
- Устранение тяжести в ногах;
- Устранение мышечного перенапряжения после соревнований или работы;
- Хроническая венозная недостаточность;
- Устранения отеков, любой этимологии;
- Эффективная профилактика тромбозов.

Противопоказания:

- Электронные медицинские имплантированные приборы
- Недавно перенесенный тромбоз; тромбофлебит; острые воспаления; нагноения; переломы; сердечно-сосудистая недостаточность 2Б - 3 стадии, сердечные отеки;
- Поздние стадии варикозного расширения вен (варикоза)
- Микро и макроангиопатии при сахарном диабете
- Менструальный цикл и беременность (в случае угрозы прерывания)
- Парестезия или повреждения кожи
- Злокачественные опухоли; доброкачественные опухоли склонные к росту
- Высокое кровяное давление (выше 180мм рт.ст.)

